

Harndiagnostik 24h Sammelharn mit Säure Stabilisator

Genereller Hinweis zur Probensammlung:

- Hände waschen
- Vorhaut zurückziehen bzw. Schamlippen spreizen
- Äußere Genitalien reinigen (z.B. mit Feuchttüchern)
- Äußere Genitalien mit Papiertuch trocknen
- Harn mit dem Auffangbecher sammeln
- Harn mit dem Auffangbecher dem Sammelbehälter zuführen

Angesäuertes Sammelharn wird für die Analyse folgender Parameter benötigt:

- Katecholamine
 - Adrenalin
 - Dopamin
 - Noradrenalin
- Metanephrine
 - Methanephrin
 - Normetanephrin
- Homovanillinsäure
- Vanillinmandelsäure
- Hydroxyindolessigsäure
- Oxalat
- Phosphor aus 24h Ausscheidung
- Calcium aus 24h Ausscheidung



Für die Untersuchung von

- **Katecholaminen**
- **Metanephrine**
- **Homovanillinsäure/ Vanillinmandelsäure**
- **Hydroxyindolessigsäure**

sind folgende **Nahrungsmittel ab 2 Tage vor Beginn und während des Harnsammelns zu meiden:**

Ananas, Auberginen, Avocado, Bananen, Kiwi, Melonen, Tomaten, Walnüsse, Capsaicin (Chilli), Nikotin und Koffein

Bitte wenden – Details zur Sammlung



+43 (0) 2742 238 38



Mathilde Beyerknecht-Straße 9
3104 St. Pölten




hotline@enml.at


Verwenden Sie bitte ausschließlich die vom Labor vorgesehenen Behälter!

Hinweis: Die Harn-Sammelflasche und Etiketten über den gesamten Sammelzeitraum nicht in der Nähe von Heizquellen aufbewahren oder direkter Sonneneinstrahlung aussetzen.

Das haben Sie erhalten:

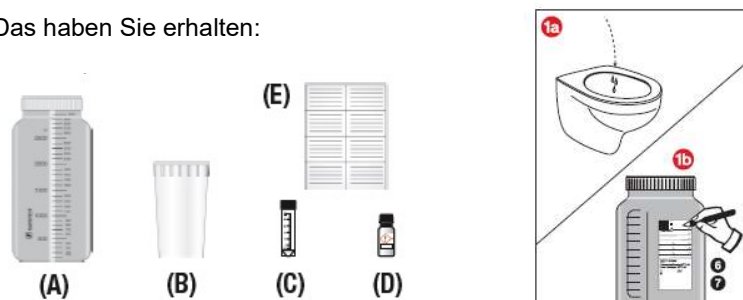

- 1a** Entleeren Sie am Morgen nach dem Aufstehen die Blase in die Toilette, d.h. diese Harnportion NICHT sammeln.
- 1b** Notieren Sie Datum und Uhrzeit unter und auf dem Flaschenetikett (Abb. E).

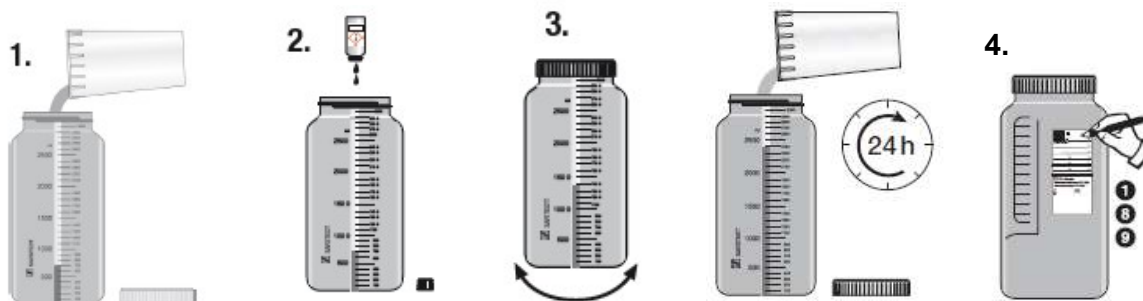

- 1. Sammeln Sie ab der nächsten Harnportion** in die Harn Sammelflasche (Abb. A). Verwenden Sie dazu ggf. einen kleinen aber ausreichend großen Auffangbecher (Abb. B) und überführen Sie den Harn vollständig in die Harn-Sammelflasche (Abb. A).
- Danach tropfen Sie den gesamten Inhalt (Säure) aus dem Glasfläschchen (Abb. D) in die Sammelflasche.
- Verschließen Sie die Sammelflasche (Abb. A) gut und schwenken Sie diese.
 - Benutzen Sie für die weitere Sammlung den Auffangbecher (Abb. B). **Urinieren Sie keinesfalls direkt in die Sammelflasche** (Abb. A)
 - Sammeln Sie jeden weiteren Harn und (auch bei Stuhlgang), und geben Sie diesen immer vollständig in die Harn-Sammelflasche (Abb. A).
 - Verschließen Sie die Harn-Sammelflasche (Abb. A) nach jeder Zugabe und schwenken Sie diese.
 - Gehen Sie am nächsten Tag zu der am Vortag notierten Uhrzeit auf die Toilette und sammeln Sie diesen Harn in der Flasche. Die Sammlung ist danach beendet.
- Lesen Sie die gesammelte Menge an der Skala auf der Harn-Sammelflasche ab. Tragen Sie diese Zahl auf dem Flaschenetikett ein, ergänzen Datum und Uhrzeit der letzten Zugabe sowie Ihre persönlichen Daten.
- Lagern Sie die gefüllte Sammelflasche lichtgeschützt und kühl. Geben Sie die gefüllte Harn-Sammelflasche bei Ihrem Arzt ab oder verfahren Sie entsprechend der Anweisung Ihres Arztes.